


coproparasitológico

1

tomar un poco de la muestra y disolver con agua de la llave en un vaso de plastico hasta que su consistencia sea como una especie de atole, colar la muestra

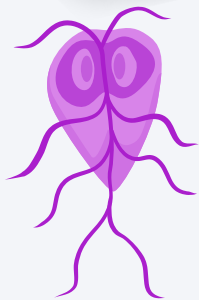


2

llenar de 2 a 3 microviales con 1 μ l de la muestra con ayuda de una pipeta y etiquetar los microviales, dejar una muestra para control y centrifugar la otra a 3.5 rpm por 5 min.

3

se decanta el agua y se deja el residuo en la punta, se coloca 1 μ l de solución fenol azucarada, se vortexea y centrifuga a 3.5 rpm por 5 min

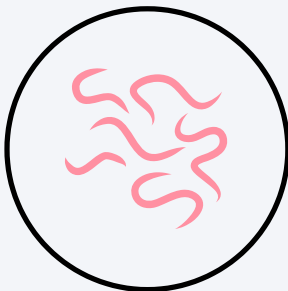

4

con ayuda de la asa bacteriologica tomar unicamente de superficie 5 gotas y colocarlas sobre un portaobjetos despues se le coloca un cubreobjetos

5

observarlos al microscopio

Nota: hacer uno a la vez para evitar que se sequen.

