


KIT DE PURIFICACIÓN A PARTIR DE GEL

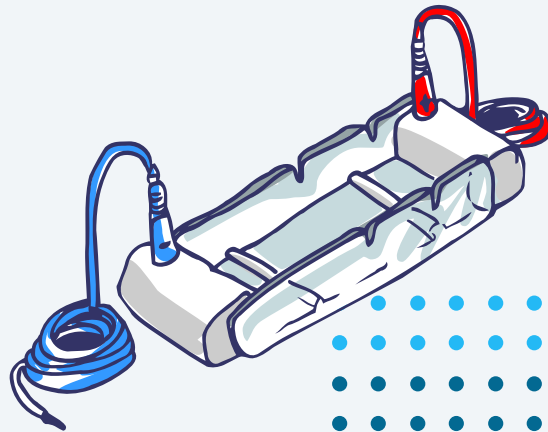

//
cortar y pesar la
banda del gel de
electroforesis

paso 1

//
incubar de 50 a 65
grados y mezclar
gentilmente hasta
que se disuelva el
gel

paso 2

paso 3

//
centrifugar a 14,500
mrp por un minuto y
descartar el
contenido del tubo
colector y volver a
insertar la columna

paso 4

paso 5

//
agregar 10 µl de
membrana
delegado por cada
10 mlg de muestra
y vortexear

//
transferir el total a
la columna e
incubar 1 minuto a
temperatura
ambiente

//
agregar 700 mcl de
solución de lavado,
centrifugar a 14.500
por un minuto, descartar el
contenido del tubo
colector y volver a
insertar la columna

paso 6

paso 7

//
volver a insertar la
columna, centrifugar a
14,500 rpm por un
minuto y transferir la
columna a un tubo
limpio

paso 8

paso 9

//
centrifugar a 14,500
rpm por un minuto y
medir ADN

paso 10

//
colocar 500 mcl de
solución de lavado,
centrifugar a 14,500 rpm
por cinco minutos y
descartar el contenido
del tubo colector

//
agregar 50mcl de
agua libre de DNAsas,
incubar 1 minuto

