


KIT DE PURIFICACIÓN A PARTIR DE REACCIÓN

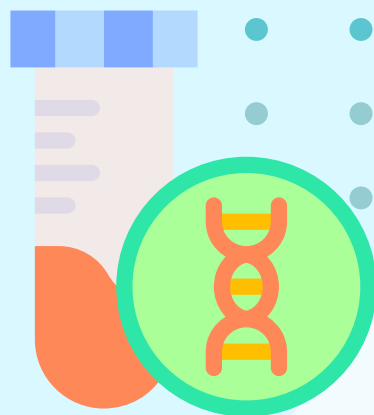

el mismo volumen de la reacción (43 μ l aprox) de membrana de ligado e insertar la microcolumna en tubo colector

el total de la reacción a la columna sin tocar e incubar por 1 minuto a temperatura ambiente

a 14,500 rpm por un minuto y descartar el contenido del tubo colector y volver a insertar la columna en el tubo colector

700 μ l de solución de lavado y centrifugar a 14.500rpm descartando el contenido del tubo colector en un contenedor de desechos.

en la columna 500 μ l de solución de lavado



agregar



transferir



centrifugar



agregar



agregar

centrifugar



descartar



centrifugar



agregar



centrifugar



a 14,500 rpm por cinco minutos.

el contenido del tubo colector.

a 14,500 rpm por 1 minuto y transferir la columna a un tubo lesteril

50 rpm de agua libre de DNAsas e incubar 1 minuto

A 14,500 rpm por 1 minuto y medir DNA en el nanodrop