


Protocolo

SIEMBRA POR AGOTAMIENTO EN ESTRÍAS

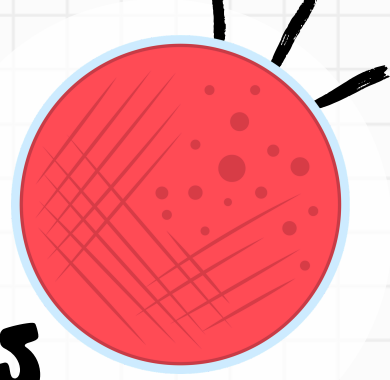

PASO 1

Con el asa en anillo carga a de material se realiza una serie de estrías paralelas no superpuestas, sobre una tercera parte de la superficie de la placa de petri conteniendo el medio de cultivo.

PASO 2


Se esteriliza el asa y se efectúan una serie de estrías en dirección perpendicular a la anterior, comenzando en la zona donde termina la última estría. Este procedimiento se repite varias veces.



a) esterilizar el ansa



b) tomar la muestra

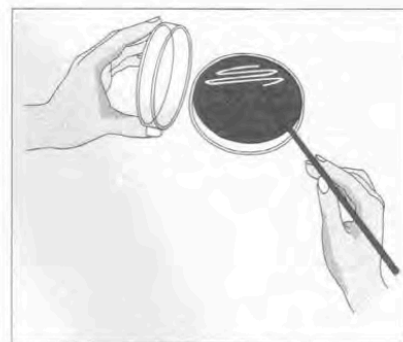

c) sembrar en estrías

inóculo inicial



segundo grupo de estrías



tercer grupo de estrías



cuarto grupo de estrías



Fuente: Ingraham J & Ingraham C. Introducción a la Microbiología. Ed Reverté SA, España, 1998

Una vez inoculadas las placas se incuban en estufa durante 24 – 48 h, a la temperatura adecuada según el microorganismo a cultivar. Utilizando esta metodología se obtienen **colonias aisladas** en las últimas estrías, separadas unas de otras, permitiendo a partir de las mismas la obtención de cultivos puros mediante resiembra en otro medio de cultivo.